

No orinar les 2 hores prèvies a la recollida de la mostra.

(No orinar las 2 horas previas a la recogida de la muestra).




1 Abans d'orinar, rentar-se les mans amb aigua i sabó i els genitals amb aigua abundant, sense sabó.
(Antes de orinar, lavarse las manos con agua y jabón y los genitales con agua abundante, sin jabón).




2 Obrir el contenidor de recollida i posar la tapa amb la cànula mirant cap amunt.
(Abrir el contenedor de recogida y colocar la tapa con la cánula mirando hacia arriba).



3 **PRECAUCIÓ** no tocar la cànula de la tapa.
(PRECAUCIÓN no tocar la cánula de la tapa).

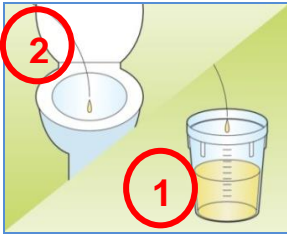

4 Recollir el primer raig d'orina en el contenidor (màxim 10 mL).
(Recoja el primer chorro de orina en el contenedor -máximo 10 mL-).

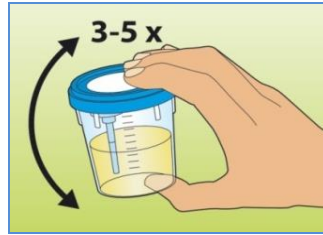

5 Tancar el contenidor i invertir de 3 a 5 vegades.
(Cerrar el contenedor e invertir de 3 a 5 veces).



6 Retirar l'adhesiu de la tapa.
(Retirar el papel adhesivo de la tapa).



7 No tocar la tapa amb els dits.
(No tocar la tapa con los dedos).



8 No destapar el tub.
(No destapar el tubo).



9 Pressionar el tub sobre l'agulla gris i mantenir-lo pressionat fins que el tub estigui ple. Retirar i portar al centre.
(Presionar el tubo sobre la aguja gris y mantenerlo presionado hasta que el tubo este lleno. Retirar y llevarlo al CAP).